

# Panasonic®

取扱説明書

バイタリフト かつさ 家庭用

品番 EH-SP85

## VITALIFT

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



水洗いOK

保証書付き

ACアダプターは除きます。

EH9210SP854 S0722-30723  
Printed in China

## もくじ

安全上のご注意	P.4
使用上のお願い	P.9
各部のなまえ	P.10
お使いになる前に	P.11
準備する	P.12
使いかた	P.14
動かしかた	
・EMSトレーニング	P.17
・温感かっさトリートメント	P.18
・顔・デコルテ・首以外の部位	P.20
こんな使いかたも	P.20
使い終わったら	P.21
よくあるお問い合わせ	P.22
修理を依頼される前に	P.24
廃棄するとき	P.25
海外で使うとき	P.26
別売品	P.27
定格・仕様	P.27
保証とアフターサービス	P.28
保証書	裏表紙

はじめに

使いかた

こんなときは

必要なとき

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

WEBにも使いかた動画などの商品情報を掲載しています  
<https://panasonic.jp/face/howto.html>



フェイスクア商品の使い方

掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがございます。ご了承ください。

### EMS<sup>®</sup>トレーニング

かっさのカーブにEMS電極を配置。肌を引き上げながら表情筋にアプローチ。  
※EMS (Electrical Muscle Stimulation) とは電気刺激によって筋肉を収縮させること。

### 温感かっさトリートメント

気になる部位にフィットするカーブと心地よい温感で美肌ケア。

本書内の  マークは、「お知らせ」や「お願い」事項を示します。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

## 危険

### トラブルを防ぐために

 ● 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因)

## 警告

### 肌や身体へのトラブルを防ぐために

 ● 下記の人には使用しない

- ・心臓疾患の人 ・紫斑(しはん)になりやすい人
- ・出血性疾患 ・血友病疾患などの血液異常の人
- ・幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人

(事故や体調不良の原因)

## 警告

### 肌や身体へのトラブルを防ぐために



● 下記の人には使用しない

- ・皮膚アレルギーの人 ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人  
(肌トラブルの原因)

- ・温度の感覚が自覚できない人  
(やけどの原因)

- ・妊娠中および産後1か月の人  
(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因)

● EMS使用時は、心臓の近くには使用しない  
(事故や体調不良の原因)

● 次の部位には使用しない

- ・神経障害・皮膚知覚障害のある部位
- ・交通事故などにより、後遺症がある部位  
(事故や体調不良の原因)

● 下記の場合や、部位には使用しない


- ・体調がすぐれない場合
- ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬・眠気を誘う薬を服用した場合
- ・疲労の激しい場合
- ・肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位
- ・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- ・当日の脱毛処理をした部位
- ・外科手術(形成・美容など)を受けた部位
- ・のど・粘膜・骨ばった部位

(肌や身体へのトラブルの原因)

● まぶた

(目のトラブルの原因)

〈禁止部位〉

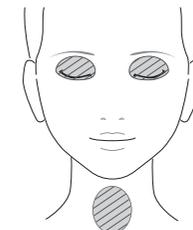

 部に使用しない

# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告

### 肌や身体へのトラブルを防ぐために



● 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する

- ・ 今までに重い病気をした人 ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 施術部位に創傷や手術跡のある人
- ・ 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疾患の人
- ・ 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・ 感染症疾患のある人 ・ 有熱性疾患のある人

(事故や体調不良の原因)

- ・ 敏感肌の人

(肌トラブルの原因)

● 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する  
(事故や肌・身体へのトラブルの原因)

### 電源は



● めれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)



- ACアダプターは水につけたり、水洗いしない  
また、風呂、シャワー室で使用しない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 専用のACアダプター以外は使用しない  
専用のACアダプターで他の製品を使用しない  
(やけどやショートによる火災などの原因)

## 警告

### 電源は



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)
- 掃除の際は、アダプターをコンセントから抜く  
(感電やけがの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)  
→ アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

### 本体は



- 火への投入、加熱をしない  
高温での充電・使用・放置・保管をしない  
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
(ソケットカバーなどの誤飲による事故やけがの原因)
- 改造・修理はしない  
→ 修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は分解しない  
(火災・感電・けがの原因)

### 異常・故障時には



- 直ちに使用を中止する  
ACアダプター使用時は、アダプターを抜く  
(火災・感電・けがの原因)  
<異常・故障例>  
本体、アダプター、コードが  
・ 変形したり異常に熱い  
・ こげ臭いにおいがする  
・ 使用中に異常な音がする  
→ すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

### 電源は

- 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない  
(感電やショートによる火災などの原因)
- 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

### 次のことも注意する

- 落としたり、ぶつけたりしない  
(けがの原因)
- 同じ箇所に過度に使用しない  
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因)
- ご使用前には温感ヘッドに割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する  
(肌を傷つける原因)
- 使用中、歯に違和感が生じる場合は、レベルを下げ使用部位を調整する  
(一時的な歯の痛みの原因)



## 廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

## ⚠ 危険

- 他の機器に使用しない
- 充電しない ●火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置をしない
- チューブをはがさない  
(発熱・発火・破裂の原因)

## ⚠ 警告

- 乳幼児の手の届くところに置かない  
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)  
→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う  
(目に障害を与える原因)  
→すぐに医師の治療を受けてください


## ⚠ 注意

- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す  
(皮膚がかぶれたりする原因)


## 使用上のお願い

ご使用後は湿気の少ないところに保管してください

- 浴室など湿気の多いところで保管すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。

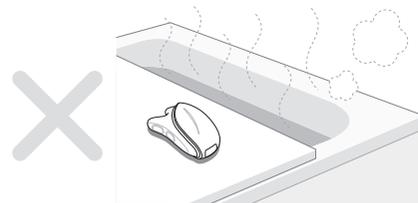


# 各部のなまえ

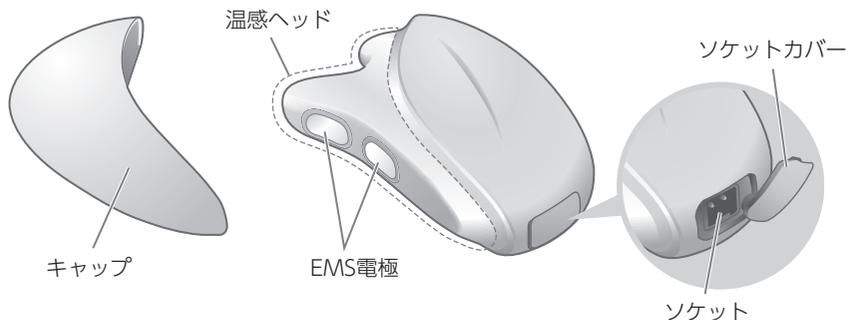

## 操作表示部

(ランプ表示例: ● ● 点灯 ○ ● 消灯 ● ● 点滅)


温感レベル表示ランプ [橙] (P.15)    EMSレベル表示ランプ [白] (P.15)    電源表示ランプ [白] (P.14)    充電表示・お知らせランプ [橙] (P.13)

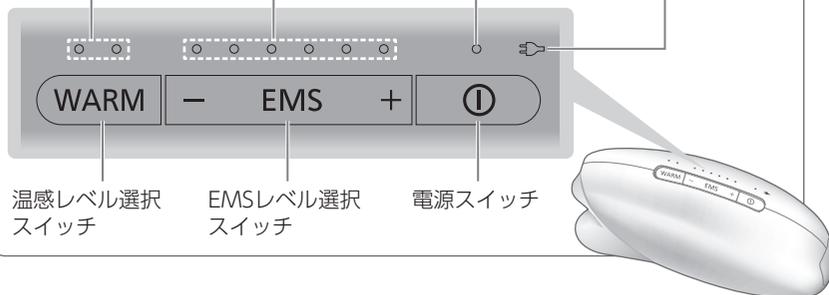

温感レベル選択スイッチ    EMSレベル選択スイッチ    電源スイッチ


## ACアダプター

(品番:RC1-80)

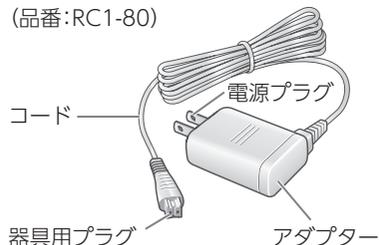

## 付属品

専用ジェル

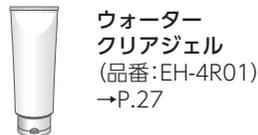

ウォータークリアジェル  
(品番:EH-4R01)  
→P.27

# お使いになる前に

## 使用頻度について

2～3日に1度の使用が目安です。

- 過度な使用はかえって肌に良くないので、肌の様子を見ながら回数・時間などを調整してください。

## 肌について

使用前に、専用ジェル(またはジェルの代わりに使う化粧品)のパッチテスト(皮膚試験)を必ず行ってください。(P.12)

- 肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)で、お使いください。

肌の様子を見ながら、お使いください。

- 肌にトラブルがあった場合は、専用ジェル(その化粧品)での使用を中止して医師に相談してください。

## EMS・温感レベルについて

肌の調子やお好みに合わせて、選んでください。

- 使いはじめは、EMSレベルは「1」、温感レベルは「低」でお使いになることをおすすめします。
- EMSの刺激の感じかたは、化粧品の種類・専用ジェルによって違います。また、肌に水がついている状態(スチーマー使用時やバスタイム)でも違います。

## アクセサリについて

ピアス、ネックレスなどのアクセサリは、はずしてお使いください。

## 化粧品について

専用ジェルまたはお手持ちの化粧品が使えます。



- 肌に負担をかけないように、本体を滑らせやすくするような化粧品と一緒にお使いいただくことをおすすめします。

化粧品が乾くとEMSの刺激を感じにくくなります。

- EMSの刺激を感じにくくなった場合には、専用ジェルまたは化粧品をつけ足しながらお使いください。

## ご注意


以下の化粧品は使用しないでください。

- オイル    • スクラブ系    • ボディソープ
- 温感効果のあるローション/マッサージジェル
- 脂肪燃焼成分を含むローション/マッサージジェル

# 準備する

## パッチテスト(皮膚試験)をする

専用ジェル(またはジェルの代わりに使う化粧品)と、この商品を組み合わせて使うことでの肌のトラブルを防ぐために、必ずテストを行ってください。

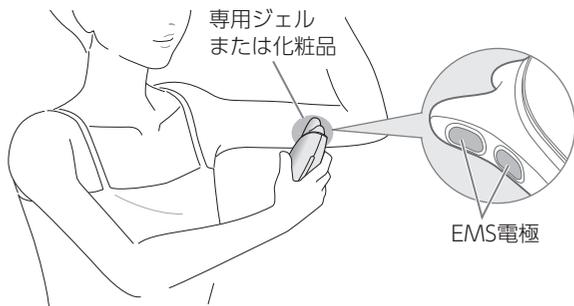

**1** パッチテストを行う部位(腕の内側)をせっけんで洗い、タオルなどでふき取る

**2** 専用ジェル(または化粧品)をつける

- 電極の大きさ程度にうすく塗ります。



**3** 電源を入れて塗布部にあてる

- ①電源を入れ、EMSレベル「1」・温感レベル「低」に設定する
- ②電極部分を腕の内側に10秒あてる
  - 終わったら、塗布部は自然乾燥させます。

**4** 48時間後の肌の状態を確認する

- 塗布部は、こすらないでください。


### 48時間内に、肌にトラブルが起きたら

専用ジェル(またはその化粧品)での使用は中止してください。

## 充電する


**1** ACアダプターと本体を接続する

- ①ソケットカバーを開ける
- ②ソケットに器具用プラグを奥までしっかり差し込む
  - ソケットに水滴がついている場合は、ふき取ってください。
- ③コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

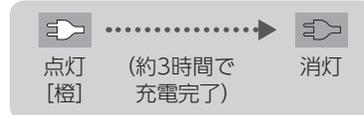

**2** アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く

- 充電後はソケットカバーを閉めてください。

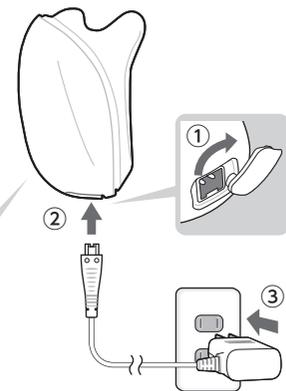

使いかた

### 充電の完了を確認するとき

充電状態で器具用プラグを抜き差しする。

→充電が完了していたら、 が点灯し、約5秒後に消灯します。

### 充電の時期

が点滅(1回/秒)したら、電池の残量が少なくなっています。充電してください。

- 1回のフル充電で、約5回使えます。(温感レベル「高」で1回8分使用)ただし、使用環境や使いかたによって、回数が少なくなる場合があります。

- i** 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電時間が変化する場合があります。また、充電開始数分間本体の が点灯しないことがあります。そのまま充電すると点灯します。
- 充電時間は、電池の状態により、変化する場合があります。
- 充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

# 使いかた


## ■ご使用前に

まずご確認ください

- 温感ヘッド表面が割れていないか、汚れがないか
- ソケットカバーがしっかりと閉まっているか

メイクを落とし、洗顔したあとに使用部位に適量の専用ジェルまたは化粧品をつけてください

適量(目安)  
さくらんぼ1粒程度  
(約2~3g)

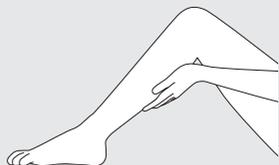

## 1

キャップをはずして  
電源を入れる




- ① を押し、電源を入れる
- 電源表示ランプ[白]、EMSレベル表示ランプ[1] [白]、温感レベル表示ランプ[低] [橙]が点灯します。

電源ON後  
約8分で自動停止

- 途中で電源を切ることもできます。① を押ししてください。

## 2

レベルを選択する

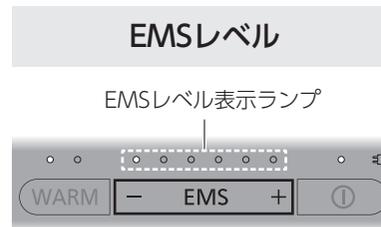

- EMS + を押し、EMSレベルを選択する

- +: 押すたびにレベルが強くなります。
- -: 押すたびにレベルが弱くなります。(選択したレベルのEMSレベル表示ランプ[白]が点灯します)




- 毎回レベル「1」から始まります。
- 「1」の状態ですら「-」を押すとEMSがOFFになります。
- 使いはじめは「1」から使用することをおすすめします。



WARM を押し、温感レベルを選択する

- 押すたびに、切り替わります。(選択したレベルの温感レベル表示ランプ[橙]が点灯します)

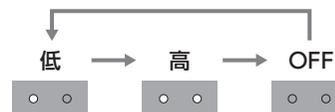

- 温感ヘッドの表面温度が「低」のとき: 約40℃
- 「高」のとき: 約43℃になります。
- 使いはじめは「低」から使用することをおすすめします。

- 温感ヘッドの表面温度は、使用環境により変わります。使用推奨温度は15℃~35℃です。推奨温度外では設定温度にならない場合があります。
- コンセントにつないだ状態では動きません。ACアダプターを抜いて使用してください。

### ■メモリー機能


前回の温感レベルが記憶されます。(EMSレベルは記憶されません)

- 長期間使用しなかった場合や電池を使い切った場合は、温感レベルが「低」になります。

# 使いかた (つづき)

## 3

### ケアをする

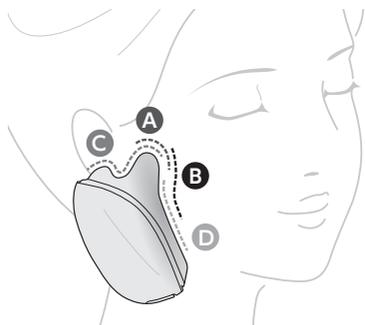


AからDの箇所を使って  
肌に沿わせるように動かす

- 使用中に滑りが悪くなったり、EMSの刺激を感じにくくなってきたら、専用ジェルまたは化粧品をつけ足してください。

#### EMS・温感の設定について

- 使う部位や動かしかたによって感じかたが異なります。お好みにあったレベルでお使いください。
- 顔と体で感じかたが違います。

過度な使用は、かえって肌に  
良くありません。  
肌の様子を見ながら、  
回数・時間などを調整して  
ください。

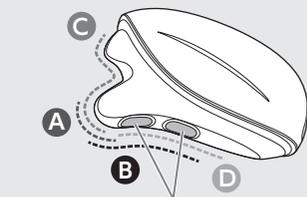

EMS電極はBとDの箇所にあります。

#### 顔や首に

##### EMSトレーニング (P.17)

EMSをONにしてBとDの箇所  
でケアしてください。(温感はお好みで)

##### 温感かっさトリートメント (P.18)

温感をONにしてABCDのお好きな  
箇所  
でケアしてください。  
EMSをONにしてお使いいただくこ  
ともできます。

#### 他の部位に

##### 顔・デコルテ・首以外の部位 (P.20)

EMS、温感ともお使いいただけます。  
お好みに合わせて設定してください。

#### i EMSをONでご使用の場合

- 使用時は1か所に止めず、必ず肌の上を動かしながら使用してください。
- レベルを上げるときは1レベルずつ刺激を確認しながらお使いください。
- 痛みを感じるほどレベルを上げないでください。

# 動かしかた

EMSトレーニング：表情筋のトレーニング\*1に

電源ONから  
約8分後

全顔 約6分

首 約2分

自動電源OFF


1/BやDを使って→の方向へ  
滑らせる



BとDはお好みで

2/1つの矢印あたり約10秒かけて、  
ゆっくり動かす

- 左右同様に滑らせてください。

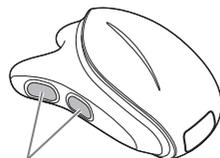

EMS電極を肌にしっかりあてる

おすすめは下記の部位です。

#### 顔



#### 首



\*のど、心臓の近くには使用しないでください。  
\*首筋に使用する場合はEMSの刺激が強く  
感じられる場合がありますので、ご注意く  
ださい。

\*1 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること

使いかた

過度な使用は、かえって肌に  
良くありません。  
肌の様子を見ながら、回数・時間  
などを調整してください。



電源ONから  
約8分後

## 顔・デコルテ


Step 1~3 の順に、各ライン3~5回を目安にお使いください

(左右同様に滑らせてください)


自動電源OFF

### Step 1

A を使って→の方向へ滑らせる

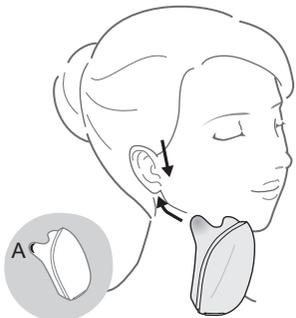


B を使って→の方向へ滑らせる

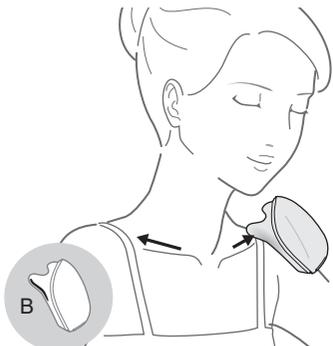


### Step 2

A を使って→の方向へ滑らせる

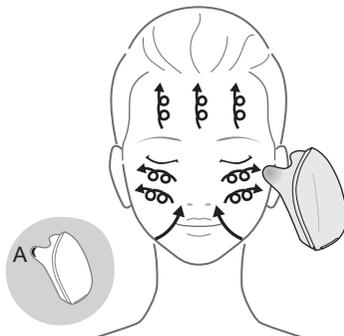


A を使って→の方向へ滑らせる

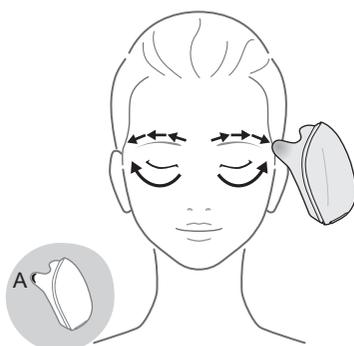


※まぶたには使用しないでください。

下記の使いかたで  
自由に滑らせる

CやD を使って→の方向へ滑らせる

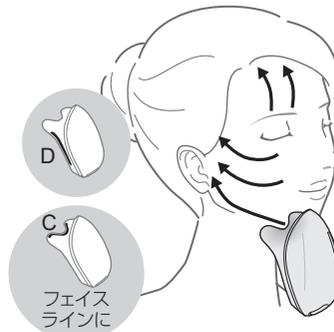


BやD を使って→の方向へ滑らせる

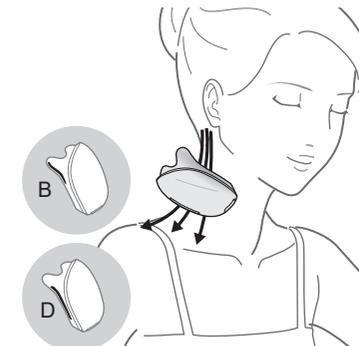


BとDはお好みで

### Step 3

CやD を使って→の方向へ滑らせる

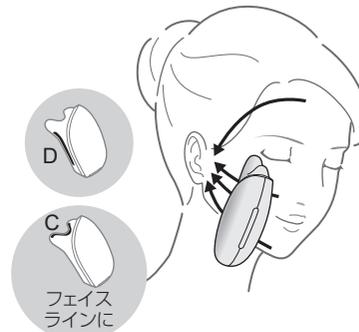

AやBやD を使って→の方向へ滑らせる

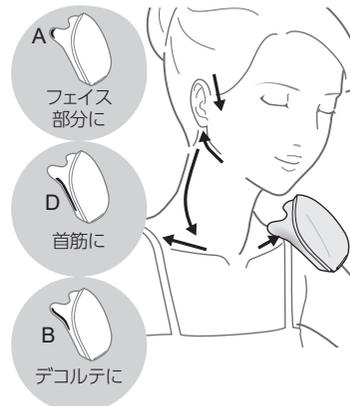

使いかた

※のどには使用しないでください。  
※EMS使用時は、心臓の近くに使用しないでください。

# 動かしかた

顔・デコルテ・首以外の部位

次の部位では下記の動かしかたがおすすです。それ以外の部位は、お好みで動かしてください。

## 二の腕

BやDを使って→の方向へ肘から脇に向かって滑らせる




BとDはお好みで

※EMS使用時は、心臓の近くに使用しないでください。

## ふくらはぎ

BやDを使って→の方向へ足首から膝の裏に向かって滑らせる

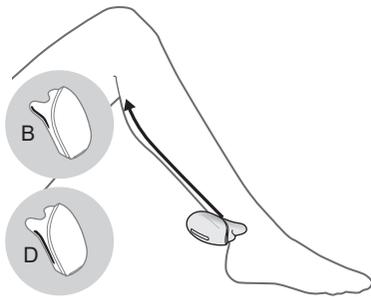

BとDはお好みで

# こんな使いかたも

スチーマー(別売)でスチームを浴びながら、一緒に。



バスタイムに

〈ポイント〉

- 肌をお湯で十分ぬらしてください。
- EMSの刺激が感じやすくなるため、レベル1から使ってください。
- 強く押しあて過ぎないでください。滑りにくなります。



浴槽内では、お湯に浸っている部分には使用しないでください。(故障の原因)

# 使い終わったら

## 専用ジェルを洗い落とす

- 顔や体についた専用ジェルは、先に軽くティッシュでふき取り、洗い流してください。その後、日頃お使いの基礎化粧品でケアしてください。
- 専用ジェルでなく、日頃お使いの化粧品を使った場合は、洗い流す必要はありません。



## 本体を水洗いする

使用後は必ず水洗いしてください。電源がOFFになっている、ソケットカバーが閉まっていることを確認してください。

- 汚れが気になるときは、固形せっけんをとかした水に浸した布でふいて、水でよく洗い流してください。

洗剤、アルコール、除光液など、水や固形せっけん以外のものを使用しないでください。(故障や部品の割れ・変色などの原因)



## 1 水またはぬるま湯でジェルや化粧品などを洗い流す

## 2 本体を2~3回程度振って、内部に入った水を出す


- ソケットカバーを開けて振ってください。



## 3 乾いた布でふき、

風通しのよい場所で十分に乾かす

- ソケットに付着した水滴をふき取って、ソケットカバーを開けた状態で乾かしてください。

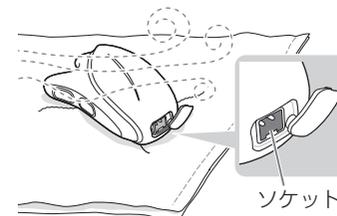

## 4 キャップを取りつけて保管する

使いかた

# よくあるお問い合わせ

## Q ご質問

## A 回答

ジェル化粧品

どうしてジェルや化粧品をつけるの？

▶ EMSの刺激を肌に伝えやすくするため、また、摩擦による肌への負担を軽減するためです。

他のジェルや化粧品を使用しても大丈夫？

▶ EMSの刺激を感じやすくするため専用ジェルをおすすめしますが、美容液や乳液、ジェル・ゲルタイプはお使いいただけます。(P.11)

使用後に使う基礎化粧品は、どんなものがいいの？

▶ 日頃お使いのものを、使用後の肌の状態に合わせてお使いください。

EMSの刺激について

刺激が弱く感じるのですが

- レベルを上げてください。
- EMS電極は、肌に当たっていますか？  
→ 2つの電極をしっかりとあててください。
- 肌が乾燥していませんか？  
→ 化粧品やジェルを塗って、肌を湿らせてからお使いください。
- クリームやオイルなど油分が多い化粧品は刺激を感じにくくなるため、EMS使用後にお使いください。

よくあるご質問



刺激が強く感じるのですが

- レベルを下げてください。
- 化粧品の種類・専用ジェル・水(スチーマー・お風呂での使用時)によってEMSの刺激の感じかたが違います。

歯に痛みを感じたら？

▶ 歯の神経に刺激を与える場合があります。強くあて過ぎず、部位をずらしてご使用ください。特に歯に詰め物がある方はご注意ください。

## Q ご質問

## A 回答

肌について

ジェルや化粧品がしみたり、肌にトラブルが起きたら？

▶ 肌の状態が治るまで、使わないでください。(専門医にご相談ください)  
• 肌が敏感になっている可能性があります。  
• 体調・ストレス・体質・内臓疾患によっても、トラブルが起こることがあります。

電池

電池はどのくらいもつの？

▶ 3年程度(ただし、保証は1年)です。  
• フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります)

電池は自分で交換できるの？

▶ ご自分ではできません。(故障の原因)お買い上げの販売店にご相談ください。

長期間使わないと、電池が劣化するのでは？

▶ 劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。

毎回充電しても、電池寿命は大丈夫ですか？

▶ リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。

その他

使わないとき、ずっと充電していてもいいの？

▶ 3時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのためアダプターを抜いてください。

こんなときは

# 修理を依頼される前に

まず、ご確認ください。

	こんなときは	ここを確かめてください
スイッチ・ランプ	 を押しても電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電できていますか？ (P.13)</li> <li>スイッチをしっかりと押していますか？</li> <li>コンセントにつないでいませんか？ →ACアダプターを抜く。</li> </ul>
	 がつかない・消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電が完了すると、消えます。(P.13)</li> <li>アダプターは、コンセントに正しく差し込んでいますか？</li> <li>器具用プラグは、ソケットにしっかりと差し込んでいますか？</li> </ul>
	 すべてのランプが点滅する(2回/秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源をいったん切ってから入れ直してください。 ・本体内部の保護機能がはたらき、異常停止しました。 →繰り返し起こる場合は、販売店にご相談ください。</li> </ul>
	充電時、  が点滅(橙)する(2回/秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電推奨温度(15℃～35℃)で充電していますか？</li> <li>・充電異常です。 →繰り返し起こる場合は、販売店にご相談ください。</li> </ul>
電源・電池	使用中に電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電切れではありませんか？ (P.13)</li> <li>電源を入れてから8分後に自動で電源が切れます。(P.14)</li> </ul>
	充電しても数分しか使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>購入後、3年以上たっていませんか？ →電池の寿命です。(P.23) 販売店にご連絡ください。 (ご自分で交換すると、故障の原因)</li> </ul>
温度	本体が温まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用推奨温度(15℃～35℃)でお使いになっていますか？</li> <li>充電切れではありませんか？ (P.13)</li> </ul>

以上の内容を確認しても、なお異常がある場合は  
アダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。  
修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプターを販売店へお持ちください。(P.28)

# 廃棄するとき

## リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭用ゴミとしては捨てないでください)

本製品の使用電池

名称	円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
公称電圧	DC3.6 V
数量	2本



Li-ion 20


## 電池の取り出しかた

**この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。**  
ご自分で分解した場合、防水機能が機能せず、故障する原因になります。

ドライバーを使い、次の手順で分解してください。

・ACアダプターは本体から抜き、充電残量がある場合は、 を押して電池を使い切ってください。

- ネジ1とネジ2か所をはずして、下側の外ケースをはずす
- 下側からネジ1か所をはずして、上側の外ケースをはずす
- 温感ヘッドを固定しているネジ3か所をはずす
- 温感ヘッドを矢印方向に引き出す
- ネジ4か所とツメをはずして、基板カバーをはずす
- ネジ1か所をはずして、基板ケースを取り出す
- 基板ケース裏側の電池を取り出す

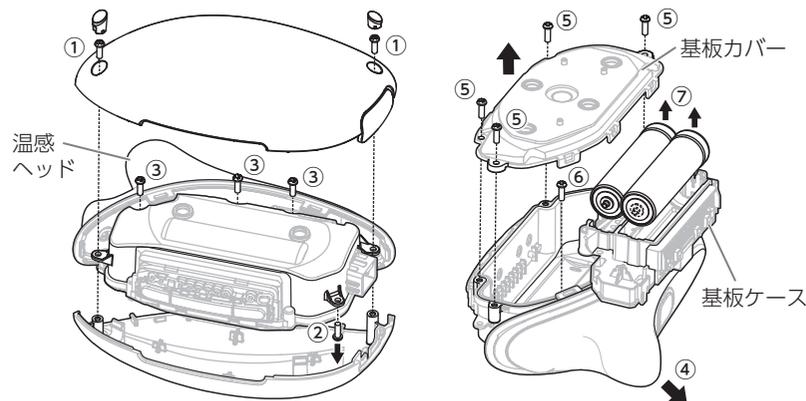

・取り出した電池は⊕⊖端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。


こんなときは

# 海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。

A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。  
(変圧器は不要です)

## ■ プラグアダプターの種類

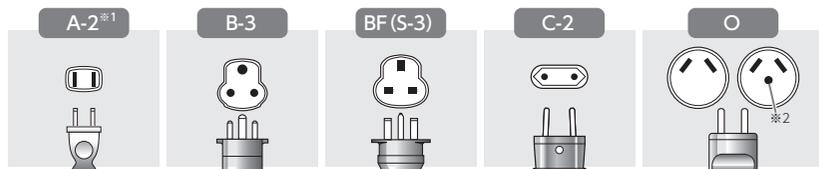

※1:日本国内もA-2タイプのプラグ形状です。

※2:アース付タイプも使用できます。

## 主な国 / 地域の代表的なプラグ

地域	国 / 地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A-2
	カナダ	A-2, BF
	ハワイ	A-2
ヨーロッパ	イギリス	B-3, BF, O
	イタリア	C-2
	オーストリア	C-2, B-3
	オランダ	C-2
	ギリシャ	C-2, B-3
	スイス	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	C-2
	スペイン	A-2, C-2
	デンマーク	C-2
	ドイツ	C-2
	ノルウェー	C-2
	ハンガリー	C-2
	フィンランド	C-2
オセアニア	フランス	C-2, O
	ベルギー	C-2
	ロシア	A-2, C-2
	オーストラリア	O
	グアム島	A-2
	サイパン島	A-2
	トンガ	O
ニュージーランド	O	
フィジー	A-2, C-2, O	

地域	国 / 地域	プラグ
アジア	日本	A-2
	インド	C-2, B-3, BF
	インドネシア	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	B-3, BF
	タイ	A-2, C-2, BF
	大韓民国	A-2, C-2, BF, O
	台湾	A-2, O
	中華人民共和国	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	A-2, C-2
	香港特別行政区	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	C-2, B-3, BF
中南米	アルゼンチン	C-2, BF, O
	プエルトリコ	A-2
	ブラジル	A-2, C-2
中東・アフリカ	メキシコ	A-2
	アラブ首長国連邦	C-2, B-3, BF
	エジプト	C-2, B-3, BF
	クウェート	C-2, B-3, BF
	トルコ	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	C-2, B-3, BF
モロッコ	C-2	

# 別売品



ウォータークリアジェル  
(EH-4R01)

・掲載品の品番・仕様は、2022年4月現在のものです。  
予告なく変更になることがあるのでご了承ください。

別売品は販売店で買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの  
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



# 定格・仕様

電源方式	充電式
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz
定格容量	20 VA
充電時間	約3時間(室温15℃~35℃)
使用電池	リチウムイオン電池
質量	約165 g(キャップ除く)
消費電力	約6 W(充電時)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、登録をお願いいたします。

こんなときは

必要なとき

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	(            )            -
お買い上げ日	年            月            日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.24)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	バイタリフト かっさ
●品番	EH-SP85
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、専用ジェルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口  
<https://panasonic.jp/support/>



理美容・健康商品  
 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-697**

パナは ロクキューナナ

受付時間  
 9:00~18:00 月~土曜日  
 (祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
 Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-554**

パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
 (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のバイタリフト かつさの点検を!



こんな  
 症状はあり  
 ませんか

- 本体、アダプター、コードが
- ・変形したり異常に熱い
  - ・こげ臭いにおいがする
  - ・使用中に異常な音がある



ご使用  
 中止

事故防止のため、  
 コンセントから  
 アダプターを抜い  
 て、必ず販売店に  
 点検をご依頼  
 ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022-2023

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
 ただし、車載を目的とした機器を除く  
 (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の動作環境  
 (ヘ) 本書のご説明と異なる使用法  
 (ト) 本書におおききあるいは  
 (チ) 持込修理の  
 お客様の負担となります。出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見 本

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## バイタリフト かつさ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-SP85	
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b> (ただし、専用ジェルは除く)	
※ お買い上げ日	日	
※ お客様	ご住所	
	お名前 <b>様</b>	
	電話 (            ) -	
※ 販売店	住所・販売店名	
	電話 (            ) -	

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手順をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。