

Panasonic®

取扱説明書

フォト ブライトショット 家庭用

品番 EH-SL85

BRIGHTSHOT

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



水洗い
できません

保証書付き

EH9210SL852 F0722-10922
Printed in Japan

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

WEBにも使いかた動画などの商品情報を掲載しています
<https://panasonic.jp/beauty/howto.html>
掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがございます。ご了承ください。



もくじ

安全上のご注意	P.4
使用上のお願い	P.8
お使いになる前に	P.8
各部のなまえとはたらき	P.9
準備する	P.10
使いかた	P.11
使い終わったら	P.15
よくあるご質問	P.16
修理を依頼される前に	P.18
海外で使うとき	P.19
定格・仕様	P.20
保証とアフターサービス	P.21
保証書	裏表紙

はじめに

使いかた

こんなときは


必要なとき


本書内の **i** マークは、「お知らせ」や「お願い」事項を示します。

安全上のご注意 必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。


安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために

-  ● ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない
(事故や体調不良の原因)


電源は

-  ● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- コードや電源プラグを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など
- ACアダプター・電源コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)
- 専用のACアダプター・電源コード以外は使用しない
また、専用のACアダプター・電源コードを他の商品に使用しない
(やけどやショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)




警告


電源は

-  ● 交流100-240 Vで使用する
- 電源プラグ・アダプター用プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 掃除の際は、電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)
- 電源プラグ・アダプターソケット・アダプター用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください


本体は

-  ● 子供の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)
- 改造・分解・修理しない (発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 吸排気口をふさいだまま使用しない (火災ややけどの原因)

本体・ACアダプター・電源コードは

-  ● 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない (感電や火災の原因)
- 水につけたり、水洗いしない
- 浴室や湿気の多い所で使用しない
(感電やショートによる火災の原因)

異常・故障時には


-  ● 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体、アダプター、コードが
・変形したり異常に熱い ・こげ臭いにおいがする
・使用中に異常な音がする
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

肌を守るために

- 次のような人は使用しない
 - 顔面の神経障害のある人
 - 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
 - 皮膚アレルギーの人、化粧品・衣類・金属などにかぶれやすい人
 - 太陽光で肌が荒れやすい人
 - 成長期の子供・自分で意思表示ができない人
(炎症、痛みの増加などのトラブルや症状悪化の原因)
 - 妊娠中または妊娠している可能性がある人
(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因)
- 次のような部位には使用しない
 - 皮膚に異常(皮膚炎、過度の日焼け、傷など)のある部位
 - 外科手術(形成・美容など)を受けた部位
 - 入れ墨(アートメイクを含む)をした部位
(炎症、痛みの増加などのトラブルや症状悪化の原因)
 - 目には直接照射しない
 - 目・まぶた、眉、唇、耳には使用しない
(目を傷めたり肌トラブルの原因)
- 次のような場合には使用しない
 - 体調のすぐれない場合
 - 肌・身体に異常を感じる場合
(炎症、痛みの増加などのトラブルや症状悪化の原因)
- 薬を服用されている人は、服用後、1週間はあける
- 薬を継続して服用されている人は皮膚科医に相談する
(服用される薬によっては肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因)

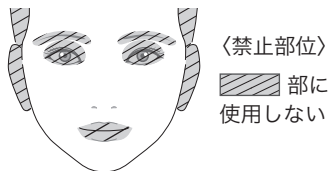

⚠ 注意

お使いのときは

- 落としたり、ぶつけたりしない
(肌を傷つけたり、けがの原因)
- アクセサリーなどの金属類はつけたまま使用しない
- めれた肌には使用しない
(感電やけがの原因)
- 同じ箇所に繰り返し照射しない
(炎症や肌トラブルの原因)
- 衣類や髪の毛に照射しない
(焦げたり、変色する原因)
- ご使用の前に照射面の変形・割れ・破損がないか確認する
(肌を傷つけたり、けがの原因)
- 素肌(メイクや日焼け止め、香水などを洗い流した状態)に使用する
(肌が光刺激に敏感になり肌トラブルの原因)
- 肌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合には、皮膚科医に相談する
(症状悪化の原因)



電源は

- 電源プラグ・器具用プラグ・アダプター用プラグにピンやゴミを付着させない(感電やショートによる火災などの原因)
- 収納時にコードをアダプターや本体に巻きつけない
(コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグ・アダプター用プラグを抜くときは、コードを持って抜かない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い


照射時に目に一時的な刺激を感じる場合があります。

- 暗い所では使用しないでください。
- 周囲に人がいないことを確認してからご使用ください。
- 光がまぶしく感じる場合は、照射するとき目を閉じてください。

お使いになる前に

使用部位について	本製品は顔(首・デコルテを含む)のスキンケアを目的としています。ただし、目・まぶた、眉、唇、耳には使えません。
使用頻度について	1日1回約10分。 1日以上あけて、週3回まででお使いください。 ・過度な使用は、かえって肌に良くありません。
肌について	使用前にパッチテスト(皮膚試験)を必ず行ってください。(P.10) ・肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。
	素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)で、何もつけずにお使いください。
	肌の様子を見ながら、お使いください。 ・肌にトラブルがあった場合は、使用を中止して医師にご相談ください。 ・肌のトラブルはストレス・体質・内臓疾患・化粧品などの原因も考えられますので、専門医にご相談ください。
アクセサリについて	ピアスなど、顔・首周辺のアクセサリは、はずしてお使いください。

各部のなまえとはたらき

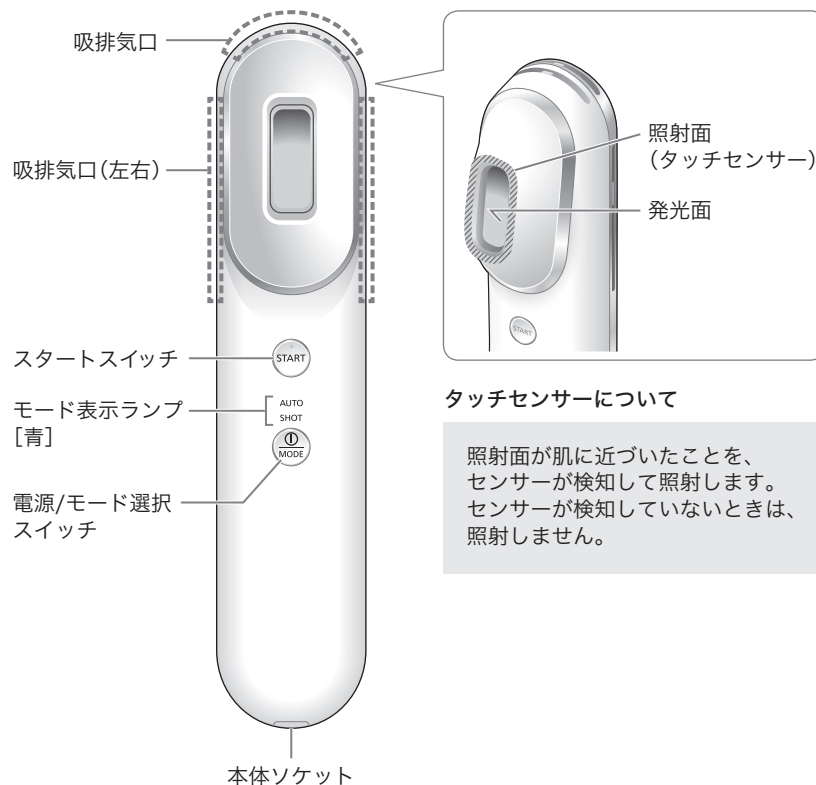


タッチセンサーについて


照射面が肌に近づいたことを、センサーが検知して照射します。センサーが検知していないときは、照射しません。

はじめに


電源コード

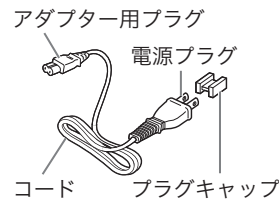

ACアダプター

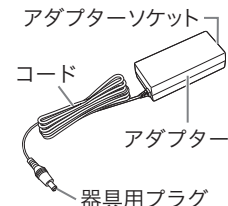

ポーチ

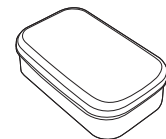


準備する

■パッチテスト(皮膚試験)のしかた

初めて使用するときや、しばらく使用しなかったときは、肌トラブルがおきないかを事前にチェックしてください。

- ①パッチテストを行う部位(腕の内側)をせっけんで洗い、タオルでふき取る
- ②電源を入れて、SHOTモードで照射する(P.11~12)

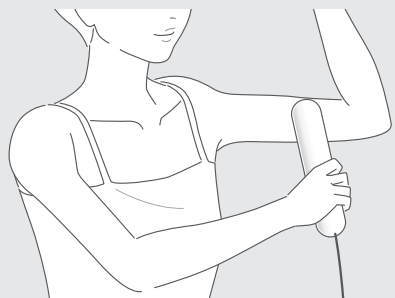

2日後



使用を中止し、肌を冷却・保湿してから皮膚科医に相談してください。

パッチテストで肌に異常がなかった場合でも、体質や体調によっては、肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。

→2日ほど、様子を見てください。

使いかた


▶▶次ページにつづく

1 電源を入れる

素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)で、お使いください

1 接続する

- ①電源コードとACアダプターを接続する
- ②ACアダプターと本体を接続する
 - ・器具用プラグを本体ソケットにしっかり差し込んでください。
- ③プラグキャップを取りはずし、電源プラグをコンセントに差し込む

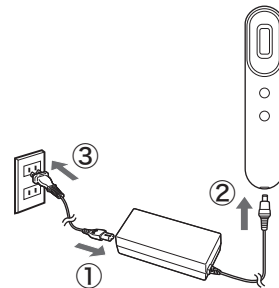

2 ①/MODE を長押し(約3秒)して 電源を入れる

- ・AUTOが点滅します。

長押しする
(約3秒)



- i 充電式ではありません。
- 次の場合は自動的に電源が切れます。
 - ①使用しないまま1分たった
 - ②1回の使用で300回照射した(目安:AUTOモード使用で約10分)
- 使用推奨温度は5℃~35℃です。推奨温度外では使用できない場合があります。


使いかた (つづき)

2

照射モードを選び、肌に照射する

1 ① MODE を押す

- ・押すたびにモードが切り替わります。

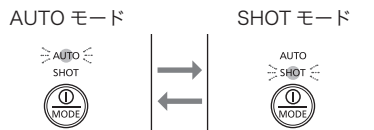

2 照射面を肌に軽くあて、② START を押す

- ・照射がスタートします。
- ・② START を押したあと、10秒間照射面が肌に触れないと、モード表示ランプが点滅に戻ります。
もう一度、肌にあてて② START を押してください。

あてるときは

- ・肌に垂直にあてる。
- ・強く押しすぎない。
- ・同じ箇所にも何度もあてない。



照射するときは

- ・タッチセンサー付近を持たない。
- ・吸排気口をふさがない。
- ・吸排気口が肌に触れないようにする。



照射が途中で止まったときは

- ・照射面を肌から約30 cm離し、約5秒間待ってください。再び肌にあてると照射を開始します。

■途中でモードを変更するとき

- ① MODE を押して、② START を押す。

3 電源を切る

AUTOモード：300回照射すると電源が切れます。(目安：約10分)


SHOTモード：① MODE を長押し(約3秒)で電源を切ります。

- ・使い終わったら、日ごろお使いの基礎化粧品でケアしてください。

2つのモードと使いかた

あてる位置を変えながら、連続で照射する：AUTOモード

肌にあてて② START を押すと、センサーが検知するたびに連続して照射します。顔全体をケアするときにお使いください。

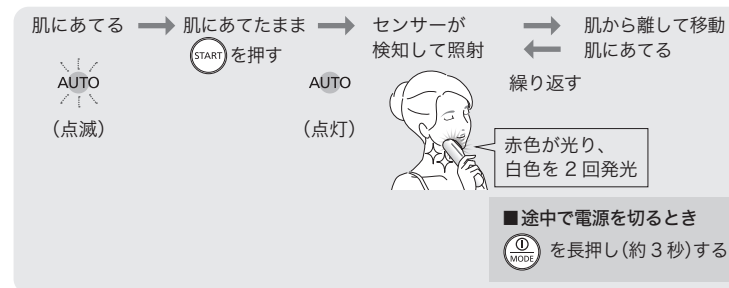

300回照射後、電源が切れる(目安：約10分)

あてる位置を確認して、1回ずつ照射する：SHOTモード

肌にあてて② START を押すと、センサー検知後に1回照射します。気になる部位をケアするときにお使いください。




電源を切る

- ・照射時、吸排気口から光が漏れますが、異常ではありません。
- ・近くに金属があると、タッチセンサーが反応して照射する場合があります。

使いかた (つづき)

動かしかた

照射面を隙間なく移動させてあてる

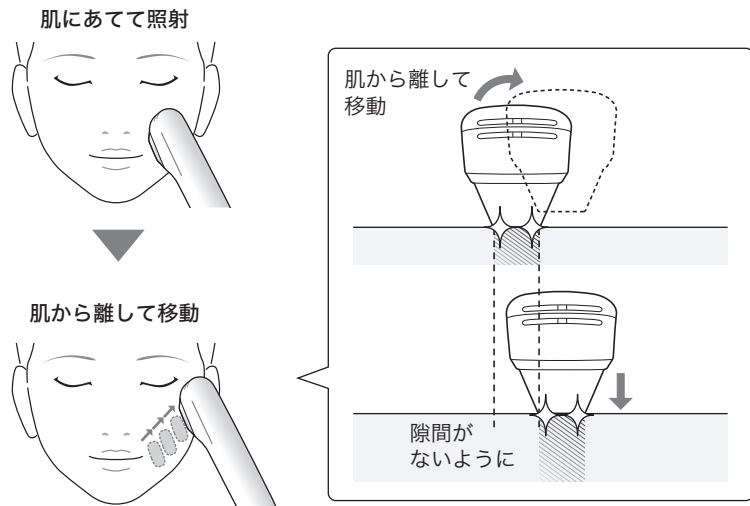


顔:

左右同様に①～⑤を繰り返す



鼻下・目の下:

照射面を横向きにして照射する

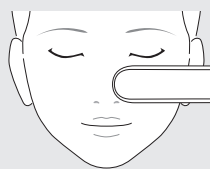

首・デコルテ:

首は照射面を横向き、デコルテは照射面を縦向きにあてるのがおすすめです。


使い終わったら

■ 使用後は

必ず掃除してください。

1 プラグを抜く


- ① コンセントから電源プラグを抜く
- ② 本体から器具用プラグを抜く
- ③ ACアダプターからアダプター用プラグを抜く

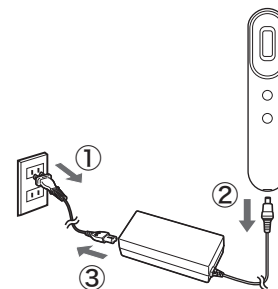


2 乾いた布でやさしくふき取る

本体の水洗いや水ぶきはできません。

照射面

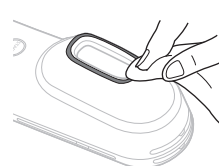

発光面

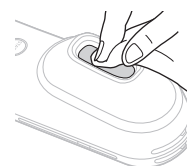



吸排気口



■ 保管するときは

ポーチに入れてください。

- ・電源プラグにプラグキャップを取りつけてください。
- ・コードは本体やアダプターに巻きつけしないでください。(コードが断線する原因)

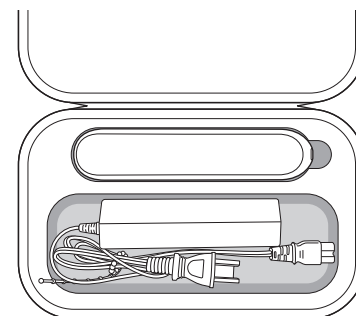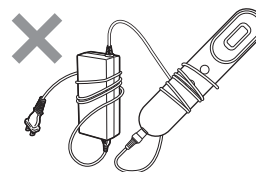


i ・アルコール・除光液・洗剤(ハンドソープ類)などを使わないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

よくあるご質問

Q ご質問

A 回答

使用部位・頻度	どの部位に使用できますか？	▶ 顔(首・デコルテを含む)に使用できます。
	ほくろや生え際にも使用できますか？	▶ 使用できます。 ただし髪の毛などの毛が生えている部分には使えません。
	毎日使用できますか？	▶ 使用できません。 1日以上あけて、週3回まででお使いください。
	メイクをした状態で使用できますか？	▶ 使用できません。
	化粧水、乳液などの保湿剤がついた状態で使用できますか？	▶ 使用できません。 素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)で何もつけずにお使いください。
使用中	照射しないのですが？	▶ ・照射面が肌に近づいていない場合は照射できません。 ・肌にあてたあとに、スタートボタンを押していますか？
	途中で止まって、300回(約10分)照射できないのですが？	▶ タッチセンサーの精度を維持するため、照射を一時休止することがあります。 その際は、肌から約30 cm離し、約5秒間待ってください。 再び肌にあてると照射を開始します。  動画で確認 照射が再開しないときは本体ソケットから器具用プラグを抜き、その後、再度器具用プラグを差し、電源を入れてご使用ください。

Q ご質問

A 回答

使用中	肌に近づけていないのに照射するのですが？	▶ タッチセンサーの近くに手や金属がありませんか？ →タッチセンサーから離してください。
	連続で照射しないのですが？	▶ 本体のリセットをしてください。 本体ソケットから器具用プラグを抜き、その後、再度器具用プラグを差し、電源を入れてご使用ください。
	使用中、光が熱く感じるのですが？	▶ SHOTモードになっていませんか？ →AUTOモードを選択してください。(P.12)
	使用中、肌に赤みが出るのですが？	▶ 同じ箇所は何度も照射していませんか？ →次の位置にあてるまでの間隔を長くしてください。
使用后	使用后、痛みや赤みが治まらないのですが？	▶ 体質や体調によっては、肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。 直ちに使用を中止し、肌を冷却・保湿してください。 2日たっても症状が続く場合は、皮膚科医に相談してください。



こんなときは

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプター・電源コードを販売店へお持ちください。(詳しくはP.21)


症状	処置
照射しない	▶ スタートボタンが押せていますか？ (P.12)
 が交互に点滅し ファンが動く (約1分間)	▶ 本体内冷却のためファンが動いています。 5℃～35℃の場所で1時間以上置いてください。 →再度電源を入れても交互点滅する場合は、 機器が故障しています。 お買い上げの販売店にご相談ください。
 が同時に 点滅する (約1分間)	▶ 5℃～35℃の場所で1時間以上置いて、再度 電源を入れてください。 →繰り返し現象が発生する場合は、機器が故障 しています。 お買い上げの販売店にご相談ください。

海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。

A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
(変圧器は不要です)

■ プラグアダプターの種類

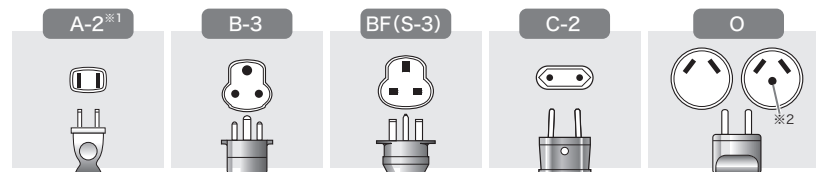

※1: 日本国内もA-2タイプのプラグ形状です。

※2: アース付タイプも使用できます。

主な国 / 地域の代表的なプラグ

地域	国 / 地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A-2
	カナダ	A-2, BF
	ハワイ	A-2
ヨーロッパ	イギリス	B-3, BF, O
	イタリア	C-2
	オーストリア	C-2, B-3
	オランダ	C-2
	ギリシャ	C-2, B-3
	スイス	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	C-2
	スペイン	A-2, C-2
	デンマーク	C-2
	ドイツ	C-2
	ノルウェー	C-2
	ハンガリー	C-2
	フィンランド	C-2
	フランス	C-2, O
	ベルギー	C-2
ロシア	A-2, C-2	
オセアニア	オーストラリア	O
	グアム島	A-2
	サイパン島	A-2
	トンガ	O
	ニュージーランド	O
	フィジー	A-2, C-2, O

地域	国 / 地域	プラグ
アジア	日本	A-2
	インド	C-2, B-3, BF
	インドネシア	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	B-3, BF
	タイ	A-2, C-2, BF
	大韓民国	A-2, C-2, BF, O
	台湾	A-2, O
	中華人民共和国	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	A-2, C-2
中南米	香港特別行政区	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	C-2, BF, O
	プエルトリコ	A-2
中東・アフリカ	ブラジル	A-2, C-2
	メキシコ	A-2
	アラブ首長国連邦	C-2, B-3, BF
	エジプト	C-2, B-3, BF
	クウェート	C-2, B-3, BF
	トルコ	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	C-2, B-3, BF
モロッコ	C-2	

こんなときは

定格・仕様

電源方式	交流式
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz
定格容量	130-180 VA
消費電力	約43 W(照射準備時)
コードの長さ	約1.8 m(ACアダプター) 約1 m(電源コード)
質量	約205 g(ACアダプター・電源コード含まず)

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電話	()	-	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.18)
でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	フォト ブライトショット
●品番	EH-SL85
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.22)にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口
<https://panasonic.jp/support/>



理美容・健康商品
 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

パナは ロクキュウナナ

受付時間
 9:00~18:00 月~土曜日
 (祝日・正月三が日を除く)

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

パナは イイヨ

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0422
 (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の URL はお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては P.21 をご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のフォト ブライトショットの点検を!



こんな
 症状はあり
 ませんか

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 本体や AC アダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。
- 使用中に異常な音がある。

ご使用
 中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 ただし、車載を目的とした機器を除く
 (ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境での使用による故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご記載事項に違反した場合
 (ト) 本書にお記載の保証書に記入されていない場合、あるいは保証書に記入されている内容と異なる場合
 (チ) 持込修理の送料等お客様のご負担となります。出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

Panasonic

持込修理

フォト ブライトショット 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-SL85		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	見本		日
※ お客様	ご住所	様	
	お名前	様	
	電話 ()	-	
※ 販売店	住所・販売店名		
	電話 ()	-	

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。
お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては
本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。