

取扱説明書

バイタリフト RF 家庭用

品番 EH-SR85

VITALIFT

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



水洗いOK

USB電源アダプター・USBケーブルは除きます。



EH9210SR855 F1122-40324

Printed in Japan

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

WEBにも使いかた動画などの商品情報を掲載しています
<https://panasonic.jp/face/howto.html>

掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがございます。
ご了承ください。



フェイスケア商品の使い方

もくじ

安全上のご注意	P.4
使用上のお願い	P.8
各部のなまえ	P.9
お使いになる前に	P.10
準備する	P.12
使いかた	P.14
使い終わったら	P.20
よくあるお問い合わせ	P.21
修理を依頼される前に	P.24
廃棄するときのお願い	P.25
海外で使うとき	P.26
別売品	P.26
定格・仕様	P.27
保証とアフターサービス	P.28
保証書	裏表紙

はじめに

使いかた

こんなときは

必要なとき

本書内の  マークは、「お知らせ」や「お願い」事項を示します。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

危険

トラブルを防ぐために

-  ●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない
- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器
- (医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因)

警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために

-  ●下記の人には使用しない
- ・心臓疾患の人
 - ・顔面の神経障害のある人
 - ・出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の人
 - ・幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人
 - ・交通事故などにより頭部に後遺症がある人
- (事故や体調不良の原因)


警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために

-  ●下記の人には使用しない
- ・皮膚アレルギーの人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- (肌トラブルの原因)
- ・温度の感覚が自覚できない人
- (やけどの原因)
- ・妊娠中および産後1か月の人
- (ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因)
- RF × EMS LIFT モードは、心臓の近くには使用しない
- (事故や体調不良の原因)
- 下記の場合や、部位には使用しない

- ・体調がすぐれない場合
- ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬・眠気を誘う薬を服用した場合
- ・疲労の激しい場合
- ・肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位
- ・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- ・当日、脱毛処理をした部位
- ・外科手術(形成・美容など)を受けた部位
- ・のど・粘膜

〈禁止部位〉

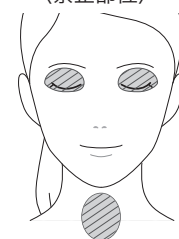

 部に使用しない

(肌や身体へのトラブルの原因)

- ・まぶた
- (目のトラブルの原因)

-  ●同じ箇所にあて続けず、肌の上を動かしながら使用する
- (やけどの原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために



● 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する

- 今までに重い病気をした人
- 急性疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 感染症疾患のある人
- 有熱性疾患のある人

(事故や体調不良の原因)

- エステ、クリニックなどで、ダウンタイム (回復に要する時間) が必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた人
- 敏感肌の人

(肌トラブルの原因)

- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する
(事故や肌・身体のトラブルの原因)

USB 電源アダプター・USB ケーブルは



- 水につけたり、水洗いしない
また、風呂、シャワー室で使用しない
- 傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、挟み込む など

(感電やショートによる火災などの原因)

- 専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)



- 掃除の際は、USB 電源アダプターをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

- ほこりが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

→ USB 電源アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

⚠ 警告

電源は



- ぬれた手で USB 電源アダプターを
コンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)



- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)

本体は



- 火への投入、加熱をしない
高温での充電・使用・放置・保管をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(事故やけがの原因)

- 改造・分解・修理しない

→ 修理 (電池交換など) はお買い上げの販売店にご相談ください
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止する
USB 電源アダプター使用時は、USB 電源アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)

< 異常・故障例 >

本体、USB 電源アダプター、コードが

- 変形したり異常に熱い
- こげ臭いにおいがする

→ すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください


安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

電源は



- ソケットがぬれている状態で充電しない
(やけどや火災の原因)
- 電源プラグやUSB プラグ・USB ポート・
ソケットにピンやゴミを付着させない
(感電やショートによる火災などの原因)

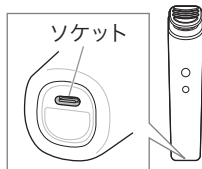

- 充電時以外は、USB 電源アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

次のことも注意する



- ヘッドを金属にあてない
(やけどの原因)



- ご使用前にはヘッドに割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する
(肌を傷つける原因)
- 顔、デコルテ、首のお手入れのみに使用する (パッチテストを行う
腕は除く)
(肌を傷つけたり、炎症などの原因)
- 使用中、歯に違和感が生じる場合は、レベルを下げる、
または部位をずらして使用する
(一時的な歯の痛みの原因)
- 本書の使用頻度と動かしかたを守る
(肌を傷つけたり、感染、炎症、出血、
色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因)


使用上のお願い

故障・破損を避けるために、下記のことをお守りください。

- 使用後は、湿気の少ないところに保管する
- 落としたり、ぶつけたりしない




各部のなまえ

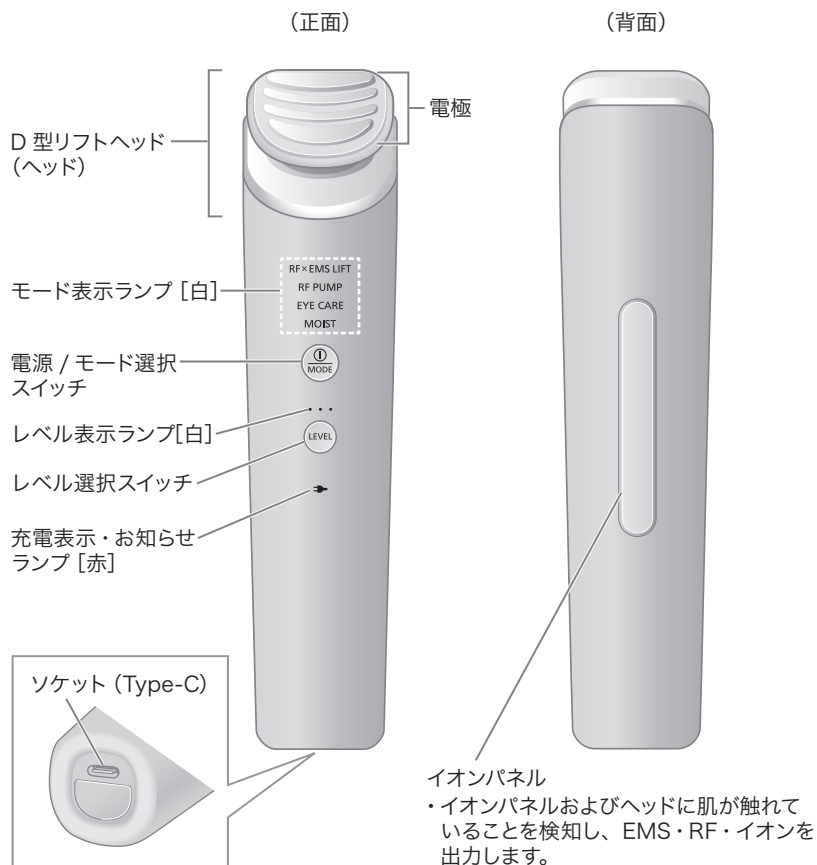


USB 電源アダプター

(品番：RU1-01)

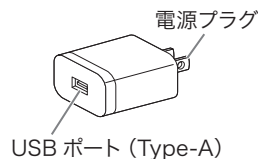

USB ケーブル

USB プラグ (Type-C)

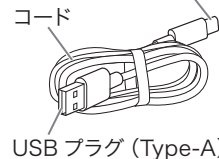

付属品

専用ジェル

スームスリフト
ジェル

(品番：EH-4R03)
→ P.26



お使いになる前に

肌について

使用前に、専用ジェルまたはお手持ちの化粧品のパッチテスト（皮膚試験）を必ず行ってください。（P.12）
・肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

素肌（メイク落とし・洗顔をした状態）で、お使いください。

過度な使用はかえって肌に良くありません。肌の様子を見ながら、お使いください。
・肌にトラブルがあった場合は、使用を中止して医師にご相談ください。
・肌のトラブルはストレス・体質・内臓疾患・化粧品などの原因も考えられますので、専門医にご相談ください。

レベルについて

肌の調子やお好みに合わせて、選んでください。
・モードによってレベルを設定する機能が異なります。（P.11）
・使いはじめは、レベル「1」で使用してください。

センサーについて

安全に使っていただくため、センサーで検知しています。
・オーバーケア防止センサー
ヘッドを8秒以上肌にあて続けると、安全のためRF・EMSの出力が一時的に停止します。一度肌から離し、再びあてると出力が戻ります。
・温度センサー
温度が高くなり過ぎると、安全のためRFの出力が一時的に停止します。ヘッドの温度が下がると出力が戻ります。

アクセサリーについて

ピアスなど、顔・首周辺のアクセサリーは、はずしてお使いください。

専用ジェル／お手持ちの化粧品について

専用ジェルまたはお手持ちの化粧品が使えます。



・肌に負担をかけず、EMSとRFを伝えやすくするため、本体をすべらせやすくするような化粧品と一緒にお使いください。

ご注意

以下の化粧品は使用しないでください。

・オイル系 ・スクラブ系 ・温感効果のあるローション

モードについて

※ ☐ のついた機能は、レベル選択スイッチでレベルを3段階から選べます。

	モード	こんなときに	機能※	動作時間
スペシャルケア	RF × EMS LIFT	顔の表情筋トレーニングに	☐ EMS、RF、イオン、LED	約6分
	RF PUMP	RFの温感トリートメントに	☐ RF、イオン、LED	約6分
	EYE CARE	目元ケアをしたいとき	☐ イオン、RF、LED	約2分
デ일리ケア	MOIST	角層までの浸透ケアをしたいとき	☐ イオン、RF、LED	約3分

使用頻度について

モードにより使用できる頻度が異なります。
頻度を守って、使用例を参考にしてください。

スペシャルケアの各モードは、同じ日に使用しないでください。

（○：使用する）

	モード	使用頻度	使用例 1週間の場合						
			月	火	水	木	金	土	日
スペシャルケア	RF × EMS LIFT	いずれかを1日1回、1日以上あけて、2つのモードを合わせて週3回まで		○					○
	RF PUMP						○		
	EYE CARE	1日1回、1日以上あけて週3回まで	○			○		○	
デ일리ケア	MOIST	1日1回、毎日使用可能 ・スペシャルケアと組み合わせ、同じ日に使用できます。その場合、MOISTモード → スペシャルケアの順にご使用ください。	○	○	○	○	○	○	○

準備する

パッチテスト（皮膚試験）をする

専用ジェルまたはお手持ちの化粧品と、この商品を組み合わせて使うことでの肌のトラブルを防ぐために、必ずテストを行ってください。



1 パッチテストを行う部位（腕の内側）をせっけんで洗い、タオルなどでふき取る

2 専用ジェルまたは化粧品をつける

- ・ヘッドの大きさ程度にうすく塗ります。
- ・専用ジェルと化粧品の両方を同時にテストする場合は、少し離れた位置に塗ってください。



3 電源を入れて塗布部にあてる (P.15)

- ①電源を入れ、
専用ジェルの場合 … RF × EMS LIFT モード、レベル「1」に設定する
化粧品の場合 …… RF PUMP モード、レベル「1」に設定する
- ②ヘッドをあて、ゆっくり円を描くように動かす（約 7 秒）
・終わったら、塗布部は自然乾燥させます。

4 48 時間後の肌の状態を確認する

- ・塗布部は、こすらないでください。

48 時間内に、肌にトラブルが起きたら


専用ジェルまたはその化粧品での使用は中止してください。

充電する


ソケットに水滴がついている場合は、ふき取ってください。

1 USB ケーブルを
USB 電源アダプターと本体に
接続する

2 コンセントに USB 電源アダプターを
奥までしっかり差し込む

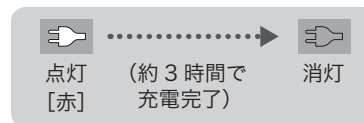

3 充電が完了したら、
USB 電源アダプターをコンセントから
抜き、USB プラグを本体から抜く

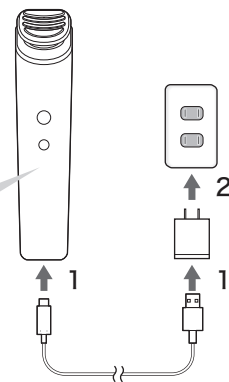

充電完了を確認するとき

充電状態で USB プラグを抜き差しする。

→充電が完了していたら、充電ランプが点灯し、約 5 秒後に消灯します。

充電の時期

充電ランプが点滅（1 回 / 秒）したら、電池の残量が少なくなっています。
充電してください。

- ・1 回のフル充電で、約 1 週間使えます。（P.11 使用例の使いかたの場合）
ただし、使用環境や使いかたによって、使用できる回数が少なくなる場合があります。

- i 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電時間が変化することがあります。また、充電開始後数分間本体の充電ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると点灯します。
- ・充電時間は、電池の状態により、変化することがあります。
- ・充電推奨温度は 15℃～35℃です。
推奨温度外では充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
- ・充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。
- ・付属の USB 電源アダプター・USB ケーブル以外を使用しないでください。

使いかた


肌の状態や悩みに合わせて、ご使用ください。
使用頻度については、P.11 を確認してください。

基本の流れ




モードごとの流れ

スペシャルケア

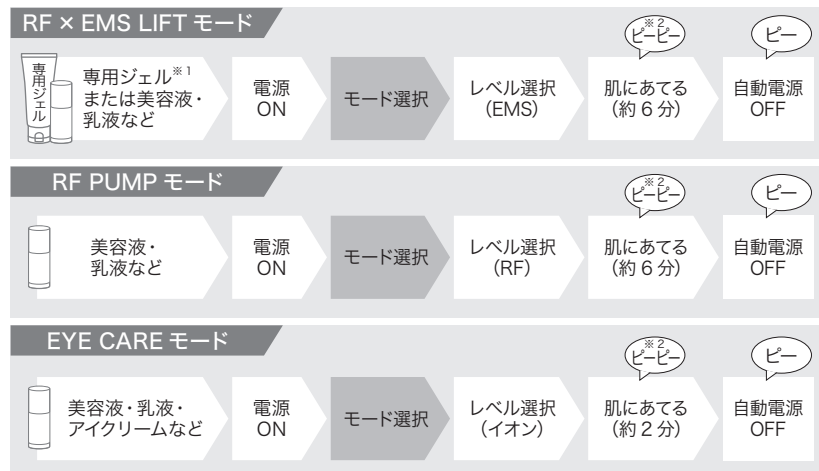

デイリーケア

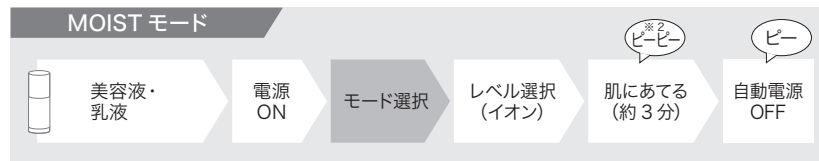


※ 1 専用ジェル適量 (目安) : 約 1 g (直径約 1.5 cm)
EMS をより効率的に肌に伝える専用ジェルをおすすめします
※ 2 動作時間の半分 (半顔使用目安) をお知らせ

使う


ご使用前に、メイクを落とし洗顔したあと、お手持ちの化粧水で肌を整え、専用ジェルまたは美容液や乳液などをつけてください。(P.14)

1 ① MODE を長押し (約 1 秒) し、電源を入れる
・ [RF x EMS LIFT] が点灯します。

2 ① MODE を押し、モードを選ぶ
・ 押すたびに、切り替わります。

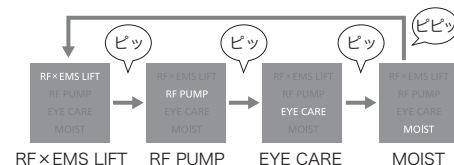

3 ② LEVEL を押し、レベルを選ぶ
・ 押すたびに、切り替わります。
・ 使いはじめは、レベル「1」で使用してください。

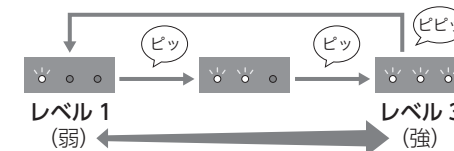

4 肌にあてて動かす

- ・ 背面のイオンパネルにしっかり触れるように握ってください。
- ・ ヘッド面を肌に密着させ、1 か所に止めないよう、必ず動かしながら使用してください。
- ・ 強く押しあてないでください。



POINT

ほおとフェイスラインは、ヘッドの平らな部分を使って引き上げるように動かす



- ・ コンセントにつないだ状態では動きません。USB 電源アダプターを抜いて使用してください。
- ・ 使用推奨温度は 15 °C ~ 35 °C です。推奨温度外では十分に温まらない場合があります。
- ・ イオンパネルに手が触れない、またはヘッドを肌にあてない状態で約 15 秒たつと「ピピピピピ」と音でお知らせし、約 30 秒後に「ピピピピピッ」と鳴り電源が切れます。

使いかた (つづき)

EMS の感じかたについて

EMS とは、筋肉を収縮させる電気刺激のことで、感じかたは、部位や化粧品の種類、塗布量によって違います。EMS を感じにくい場合は、次のことをお試しください。

EMS を感じる 5 つのポイント

ポイント

1 化粧水で肌を整える

洗顔し、お手持ちの化粧水で肌を整えてからお使いください。



ポイント

2 肌をしっかりぬらす

専用ジェルまたは化粧品をたっぷりつけてください。少なかったり、乾いてくると EMS の刺激を感じにくくなるためつけ足してお使いください。


- ・化粧品で EMS を感じにくい場合は、専用ジェルのご使用をおすすめします。
- ・オイルタイプの化粧品は EMS を感じにくくなる可能性があります。



ポイント

3 RF × EMS LIFT モードを選ぶ

RF × EMS LIFT モード以外では EMS が出力されません。

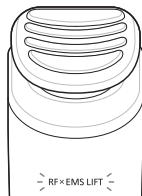

ポイント

4 肌を検知させる

① イオンパネルに触れる


背面のイオンパネルにしっかり触れるように握ってください。



イオンパネル

② 電極を肌にあてる

電極をしっかりと肌にあてていないと EMS を感じられません。

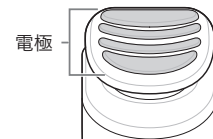

電極

ポイント

5 動かしながら使う

- ・ヘッド面を肌に密着させ、1 か所に止めないよう必ず動かしながら使用してください。
- ・ヘッドを 8 秒以上肌にあて続けると、RF・EMS の出力が一時的に停止します。一度肌から離し、再びあてると出力が戻ります。(オーバーケア防止センサー)



使いかた

使いかた (つづき)

動かしかた


半顔ずつお手入れしてください。

- それぞれのモードの動作時間の半分で、「ピーピー」とお知らせ音が鳴ります。音を目安に、反対側のお手入れを行ってください。
- 左右同様に矢印に沿ってすべらせてください。

RF × EMS LIFT / RF PUMP モード

約 6 分

自動電源 OFF

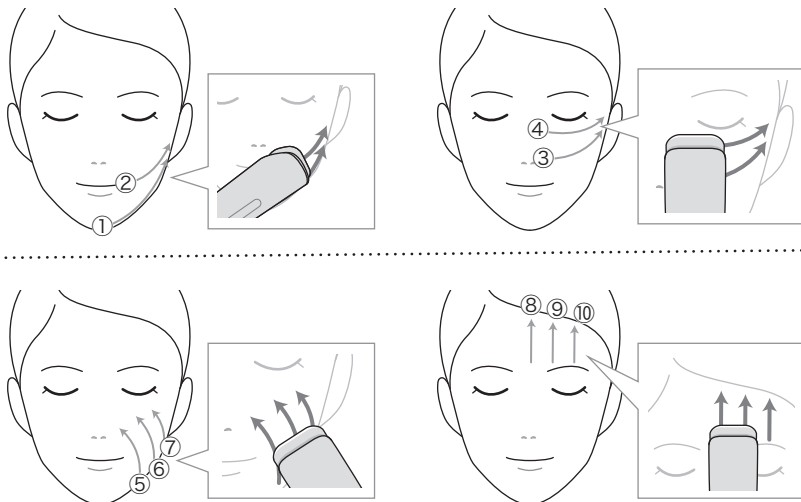


- 1つの矢印あたり ①～⑦：約 7 秒、⑧～⑩：約 3 秒
- ゆっくり引き上げるように動かす
 - 同じ番号だけを繰り返さず、①～⑩の順に動かす

- i**
- RF × EMS LIFT モード使用中、EMS の刺激を感じにくいときは、専用ジェルまたは化粧品をつけ足してください。
 - 化粧品で EMS を感じにくい場合は、専用ジェルのご使用をおすすめします。
 - 背面のイオンパネルにしっかり触れてください。
 - 電極をしっかりと肌にあててください。(P.17)
 - 8 秒以上肌にあって続けると、RF・EMS の出力が一時的に停止します。(P.10)
 - RF PUMP、EYE CARE、MOIST モード使用中、すべりが悪いときは、化粧品をつけ足してください。

EYE CARE モード

約 2 分

自動電源 OFF

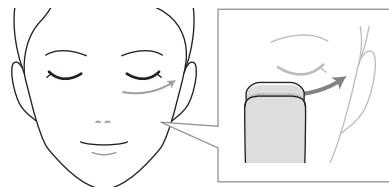


- 1つの矢印あたり 約 5 秒
- まぶたには使用しない

MOIST モード

約 3 分

自動電源 OFF

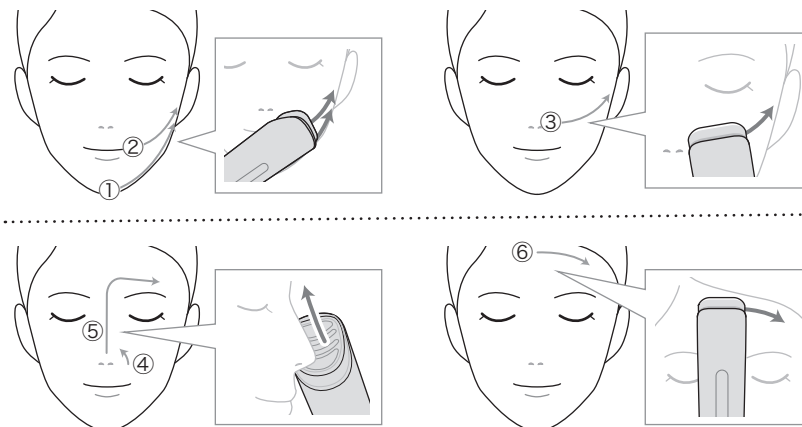

- 1つの矢印あたり ①～③：約 7 秒、④～⑥：約 5 秒
- 同じ番号だけを繰り返さず、①～⑥の順に動かす

- モードが終了すると、「ピー」と鳴り自動的に電源が切れます。途中で電源を切りたいときは、**MODE** を長押ししてください。
- 使用中でモードを変更したいときは、一度電源を切ってから変更してください。電源を切らずに変更した場合は、電源 ON から約 6 分半後に「ピー」と鳴り電源が切れます。使用時間が長くなり、過度なお手入れを防ぐためです。

使いかた

使い終わったら

肌を整える

- ・日頃お使いの化粧品でケアをしてください。




本体をふく、または水洗いする

- ・電源が切れていることを確認してください。
- ・汚れが気になるときは、固形せっけんをとかした水に浸した布でふいて、水でよく洗い流してください。

1 ティッシュなどで、ヘッドに残ったジェルや化粧品をふき取る またはヘッドを水洗いする




- ・水の中につけないでください。

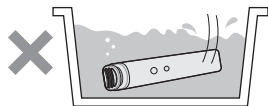


2 ソケットに水滴が付着した場合は 水滴を取り除く


- ・乾いた布の上で軽くたたき水滴を取り除いてください。

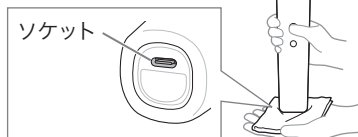

3 乾いた布でふき、 風通しのよい場所で十分に乾かす

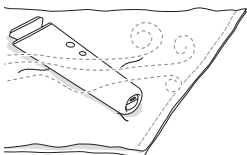

- ・USB ケーブルは本体に巻きつけて保管しないでください。

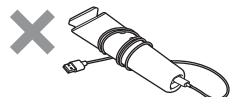

- i** ・洗剤、アルコール、除光液など、水や固形せっけん以外のものを使用しないでください。
・付着したジェルや化粧品は、確実に落としてください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)

よくあるお問い合わせ

Q ご質問

A 回答

搭載している技術

RFとは？

- ▶ Radio Frequency (ラジオ波) と呼ばれる高周波のことです。肌に温感を伝えます。

EMSとは？

- ▶ 筋肉を収縮させる電気刺激のことです。

イオンとは？

- ▶ イオンの力で角層へ美容成分を届ける技術のことです。

LEDとは？

- ▶ 肌をフォトでケアする技術のことです。

使用部位・頻度

手やボディにも使って良いの？

- ▶ 顔、デコルテ、首の美容目的のみにご使用ください。

1日に何回使っても、大丈夫？

- ▶ モードにより使用頻度が異なります。「使用頻度について」(P.11)をご確認ください。

ジェル・化粧品

どうしてジェルや化粧品をつけるの？

- ▶ EMS、RF をしっかりと肌に伝えやすくするためです。

RF × EMS LIFT モード使用時に、他のジェルや化粧品を使用しても大丈夫？

- ▶ EMS の刺激を感じやすくするため専用ジェルをおすすめしますが、お手持ちの美容液や乳液などもお使いいただけます。(P.10)

専用ジェルを使用後、ファンデーションを塗ると肌にポロポロとカスのようなものが出るのですが

- ▶ 一度ジェルを洗い流してから、メイクをしてください。

使用後に使う基礎化粧品は、どんなものでもいいの？

- ▶ 日頃お使いのものを、使用後の肌の状態に合わせてお使いください。

肌について

ジェルや化粧品がしみたり、肌にトラブルが起きたら？

- ▶ 肌の状態が治るまで、使わないでください。(専門医にご相談ください)
・肌が敏感になっている可能性があります。
・体調・ストレス・体質・内臓疾患によっても、トラブルが起こることがあります。

使いかた

こんなときは

よくあるお問い合わせ(つづき)

Q ご質問

A 回答

RFの温感について

熱く感じるのですが

- ・レベルを下げるか、少し速めに動かしてください。
- ・使いはじめは、レベル「1」から始めてください。
- ・使用中はヘッドを同じ箇所にあて続けず、必ず肌の上を動かしながらお使いください。

EMSの刺激について

弱く感じるのですが

- ・専用ジェルや化粧品が足りなかったり、乾燥している場合はつけ足してお使いください。
- ・オイルタイプの化粧品は感じにくくなる場合があります。
- ・化粧品でEMSが感じにくい場合は、専用ジェルのご使用をおすすめします。
- ・専用ジェルや化粧品を腕の内側につけ、RF×EMS LIFT モードでEMSを感じるかご確認ください。(レベル「1」からお試ください)
- ・RF×EMS LIFT モードでお試しください。
- ・背面のイオンパネルにしっかり触れてください。
- ・電極をしっかり肌にあててください。
- ・8秒以上肌にあて続けると、RF・EMSの出力が一時的に停止します。(P.10)

強く感じるのですが

- ・レベルを下げてください。

歯に痛みを感じたら?

- 歯の神経に刺激を与える場合があります。特に歯に詰め物がある方はご注意ください。
- ・レベルを下げてください。
- ・強くあて過ぎず、部位をずらしてお使いください。

Q ご質問

A 回答

電池

電池はどのくらいもつの?

- 3年程度(ただし、保証は1年)です。
- ・フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります)

電池は自分で交換できるの?

ご自分ではできません。(故障の原因)お買い上げの販売店にご相談ください。

長期間使わないと、電池が劣化するのでは?

劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。

毎回充電しても、電池寿命は大丈夫ですか?

リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。

その他

ソケットがぬれたまま充電してもいいの?

ソケットの水滴をふき取って乾かしてから充電してください。(P.20)

＼WEBでも確認／



使わないとき、ずっと充電していてもいいの?

3時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのためUSB電源アダプターを抜いてください。

こんなときは

修理を依頼される前に

まず、ご確認ください。

こんなときは		ここを確かめてください
スイッチ・ランプ	① を押しても電源が入らない	- 充電できていますか？ - 電源 / モード選択スイッチを長押し (約 1 秒) していますか？ - コンセントにつないでいませんか？ → USB 電源アダプターを抜いてください。 - 付属以外の USB 電源アダプターと USB ケーブルを使用していないですか？ → 必ず付属品を使用してください。
	がつかない・消える	- 充電が完了すると、消えます。(P.13) - USB 電源アダプターは、コンセントに正しく奥までしっかり差し込んでいますか？ - USB プラグは、ソケットと USB ポートにしっかり差し込んでいますか？
	すべてのランプが点滅する (2 回 / 秒)	電源をいったん切ってから入れ直してください。 ・本体内部の保護機能がはたらき、異常停止しました。 → 繰り返し起こる場合は、販売店にご相談ください。
	充電時、が点滅 [赤] する (2 回 / 秒)	- 充電推奨温度 (15 °C ~ 35 °C) で充電していますか？ - 充電異常です。 → 繰り返し起こる場合は、販売店にご相談ください。
電源・電池	使用中に電源が切れる	- 充電切れではありませんか？ (P.13) - 各モードが終了すると、自動で電源が切れます。 - イオンパネルに手がしっかり触れた状態で、ヘッドを肌にあてていますか？ (P.15) - モードを途中で変更した場合、電源を入れてから約 6 分半後に自動で電源が切れます。

こんなときは		ここを確かめてください
電源・電池	フル充電しても数分しか使えない	- 購入後、3 年以上たっていないですか？ → 電池の寿命です。(P.23) 販売店にご連絡ください。 (ご自分で交換すると、故障の原因) - 付属以外の USB 電源アダプターと USB ケーブルを使用していないですか？ → 必ず付属品を使用してください。

以上の内容を確認しても、なお異常がある場合は

USB 電源アダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・USB 電源アダプター・USB ケーブルを販売店へお持ちください。(P.28)

廃棄するときのお願い

内蔵している電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては、一般ごみ (不燃ごみ) と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。
・充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。

本製品の使用電池

名 称	ラミネート型 リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
公称電圧	DC7.3 V
数 量	1 個



こんなときは

海外で使うとき

この商品は、100-240 V 対応 Aプラグ仕様です。
Aプラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
(変圧器は不要です)

海外のプラグタイプについて
参考情報を WEB に掲載
しています。

ダウンロード 



定格・仕様

電源方式	充電式
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz
定格容量	20 VA
充電時間	約 3 時間 (室温 15 °C ~ 35 °C)
使用電池	ラミネート型 リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
質 量	約 190 g
消費電力	約 7 W (充電時)

別売品



スムースリフトジェル
(EH-4R03)
洗い流し不要

掲載品の品番・仕様は、2024 年 3 月現在のものです。
予告なく変更になることがあるのでご了承ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

こんなときは

必要なときは

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	(	)	—
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは
「修理を依頼される前に」(P.24～25)でご確認のあと、直らないときは、
まずUSB電源アダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡くだ
さい。

●製品名	バイタリフト RF
●品 番	EH-SR85
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させてい
たきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、専用ジェルは消耗品です
ので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させて
いただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**
当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご
相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させて
いただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番
号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務
等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓
口にご連絡ください。

必要
な
と
き

サポート総合窓口 https://panasonic.jp/support/



理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

パナは ロクキューナナ

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記の URL はお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のバイタリフト RF の点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ・コードや USB 電源アダプターが異常に熱い。
- ・本体や USB 電源アダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから USB
電源アダプターを
抜いて、必ず販売店
に点検をご依頼くだ
さい。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022-2024

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境
(ヘ) 本書のご
(ト) 本書にお
あるいは
(チ) 持込修理の
お客様の負担となります。出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見 本

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

バイタリフト RF 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-SR85		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、専用ジェルは除く)		
※ お買い上げ日	見 本		日
※ お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電 話 ()	—	
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電 話 () —		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手順をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。